ТЕРМИНАЛ «ДИМЕКО»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение 3

1.1 Список сокращений, терминов и определений 3
1.2 Связанные документы 3

2 Описание Терминала «Димеко» 4

2.1 Компоненты Терминала «Димеко» 4
2.2 Общая схема процесса работы Терминала «Димеко» 4
2.3 Требования к квалификации специалистов 5

3 Подготовка Терминала «Димеко» к работе 6

3.1 Требования к установке и расположению оборудования 6
3.2 Включение прибора 6

4 Обслуживание системы 6

4.1 Техническое обслуживание Терминала «Димеко» 6
4.2 Периодическая поверка оборудования 6

6 Проблемы и ошибки 7

1 Введение

В данном руководстве описана процедура установки и настройки Терминала «Димеко».

1.1 Список сокращений, терминов и определений

Термин/Сокращение	Описание
Терминал «Димеко»	Терминал для прохождения автоматизированного медицинского осмотра.
Система	Программно-аппаратное обеспечение автоматизированного медицинского осмотра.
АМО	Автоматизированный медицинский осмотр.
Сотрудник	Пользователь, проходящий АМО на Терминале «Димеко».

1.2 Связанные документы

Инструкция по прохождению АМО на Терминале «Димеко»:
И-Ф-12-16 Инструкция по прохождению АМО.doc

2 Описание Терминала «Димеко»

Терминал «Димеко» выполнен в цельнометаллическом корпусе, в который интегрированы анализатор паров этанола, тонометр, микрокомпьютер, принтер, индикатор температуры, камера, трубка связи (опционально), блок питания, считыватель магнитных карт (с рабочей частотой 13,56 МГц и 125 кГц, EM-Marine, HID ProxCard II, Mifare, Mifare Plus, Mifare-UL , Temic), сканер отпечатка пальцев (опционально), а также другие аппаратные средства, обеспечивающие взаимную работу установленных компонентов.

2.1 Компоненты Терминала «Димеко»

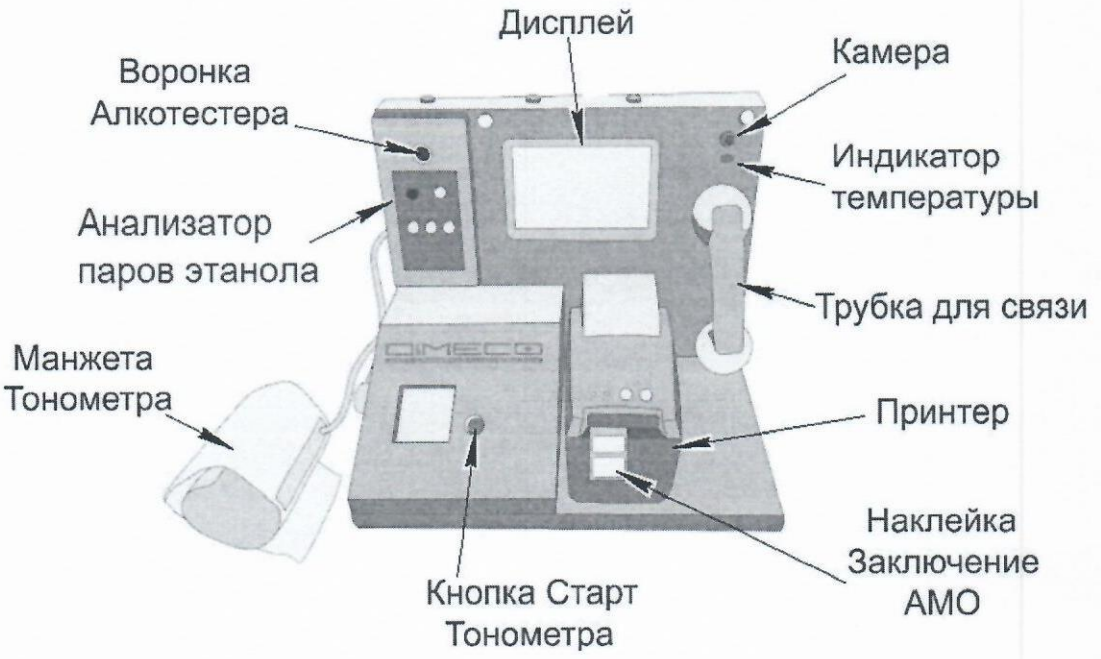


Рисунок 1. Терминал «Димеко» для прохождения автоматизированного медицинского осмотра.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на его потребительские свойства.

2.2 Общая схема процесса работы Терминала «Димеко»

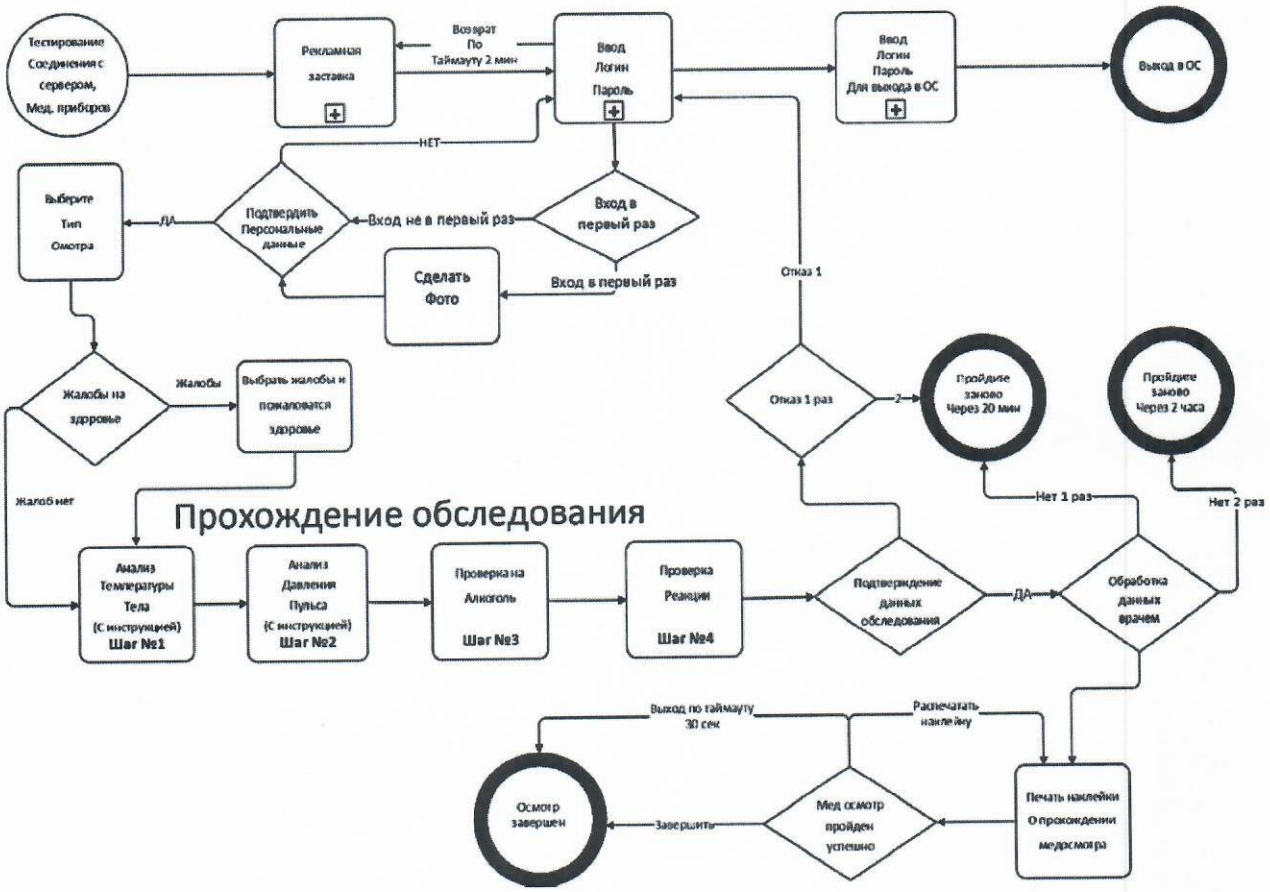


Рисунок 2. Блок-схема алгоритма работы Терминала «Димеко» при прохождении АМО

2.3 Требования к квалификации специалистов

Операции по установке и обслуживанию выполняются квалифицированным и ответственным персоналом.

- Для работы с программным обеспечением достаточно навыков работы с персональным компьютером.
- Для обслуживания системы требуется администратор системы с навыками основ знаний задач системного администрирования и инструментария для решения этих задач, уверенного выполнения закрытия и перезагрузки системы, владения основами подключения локальных сетей.

3 Подготовка Терминала «Димеко» к работе

3.1 Требования к установке и расположению оборудования

- Терминал «Димеко» должен быть установлен на ровную поверхность
- минимальный размер рабочего места для установки 40 см х 80 см
- передняя часть Терминала «Димеко» должна быть установлена вплотную к краю стола
- для подключения питания Терминала «Димеко» используют сеть переменного тока 220В 50Гц (сеть автомобиля 24В – опционально)
- Терминал «Димеко» может быть подключен к сети интернет посредством кабеля с разъёмом RJ-45.

Внимание! При наличии вмятин, видимых повреждений, разболтанности отдельных компонентов Терминала «Димеко» подключение к сети электропитания запрещено!

3.2 Включение прибора

- вставить вилку питания в розетку
- нажать кнопку пуск на задней панели прибора
- дождаться появления стартовой страницы

4 Обслуживание системы

4.1 Техническое обслуживание Терминала «Димеко»

– Периодический визуальный осмотр на отсутствие повреждений шланга с манжетой тонометра. При обнаружении повреждений следует незамедлительно заменить шланг с манжетой.
– Периодический осмотр воронки анализатора паров этанола, дисплея, трубки для связи на наличие загрязнений. При обнаружении загрязнений требуется удалить их чистой, влажной салфеткой.

4.2 Периодическая поверка оборудования

В комплект данной системы входит оборудование, относящееся к медицинским приборам и требующее прохождение периодической поверки.

Оборудование, подлежащее поверке:

Оборудование	Периодичность поверки
Анализатор паров этанола «Динго» B01	6 месяцев
Тонометр OMRON M10 IT	24 месяца

Поверка проходит в сертификационных центрах.

5 Проблемы и ошибки

При возникновении любой ошибки в работе программы необходимо выполнить диагностику путём перезагрузки Терминала «Димеко». Необходимо выполнить перезагрузку электропитания. Выключить прибор из розетки и после 10 секундной паузы заново включить. В процессе чего произойдет проверка работоспособности всего оборудования.

При повторных сбоях в работе Терминала «Димеко» необходимо обратиться в круглосуточную техническую поддержку по телефону 8 800 100 43 70.